



Stoma
Skin
Soul



Ein sanfter Druck
in die richtige
Richtung



JETZT NEU! Der zweiteilige soft konvexe NovaLife TRE™ Hautschutz von Dansac

Für sanften Druck genau dort, wo er rund um das Stoma am nötigsten ist.

- Der weiche und flexible Hautschutz hilft, sich wohl zu fühlen und passt sich den Konturen des Bauches an
- Ein sanfter Druck dort, wo er am nötigsten ist, bietet zusätzlichen Schutz gegen Unterwanderungen
- Die sichere Verbindung von Hautschutz und Beutel sorgt nach jedem Versorgungswechsel für ein sicheres Gefühl
- In der TRE™ Technologie von Dansac wirken drei Schutzwälle für gesündere Haut zusammen: Adhäsion, Absorption und pH-Pufferung
- Einfach anwendbar und gut für einen individuellen Lebensstil
- Kombiniert Tragekomfort, Flexibilität und Hautgesundheit

Die richtige Wahl für die Hautgesundheit
Ihrer Patientinnen und Patienten.

dansac 



Flexibilität und
sanfter Druck
für gesunde Haut

NEU: soft konvexer TRE™ Hautschutz

Flexibel und anpassungsfähig, damit sich Ihre Patientinnen und Patienten mit gesunder Haut noch wohler fühlen

- Für eine sichere Abdichtung entwickelt, bietet der TRE™ Hautschutz sanften Druck dort, wo er nötig ist. Geeignet für viele Körperformen
- Das weiche, flexible und konvexe Design hilft, Unterwanderungen zu minimieren. Die Vorteile der TRE™ Technologie können dabei die Erhaltung der Hautgesundheit Ihrer PatientInnen unterstützen.
- In der TRE™ Technologie von Dansac wirken drei Schutzwälle zusammen: Adhäsion, Absorption und ph-Pufferung.



Für sanften Druck in die richtige Richtung.



Der neue zweiteilige soft konvexe NovaLife TRE™ Hautschutz kombiniert alle Vorteile der einteiligen Lösung mit zusätzlicher Vielseitigkeit. So passt er sich dem persönlichen Lebensstil Ihrer PatientInnen noch besser an.

Innovative Vorteile im Überblick

Flexibel


Der neue TRE™ Hautschutz von Dansac ist besonders flexibel konzipiert, um natürliche Körperbewegungen zu unterstützen.

Im Vergleich zu herkömmlichen Produkten mit 1,1 mm dickem Hydrokolloid misst er nur 0,7 mm. Er verjüngt sich auf 0,3 mm, was für mehr Sicherheit und ein leichteres Tragegefühl sorgt.

Konvex

Die 6 mm soft Konvexität hilft, das Stoma in den Beutel zu drücken und Unebenheiten an der Haut rund um das Stoma auszugleichen.

Die Tiefe der Konvexität und der sanfte Druck können auch helfen, die Prominenz des Stomas zu verbessern.

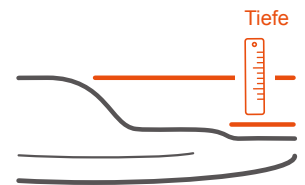

Sanft

Dieser Hautschutz ist besonders sanft zur Haut und lässt sich mühelos entfernen.


Von ihm wird rund um das Stoma ein sanfter Druck aufgebaut: Dort, wo er am nötigsten ist, um zusätzlichen Schutz gegen Unterwanderungen zu bieten.

Vielseitig

Bei Bedarf kann der Beutel ausgetauscht werden, ohne jedes Mal den Hautschutz zu wechseln.

Der untergreifbare Rastring kann helfen, eine sichere Verbindung zwischen Hautschutz und Beutel zu gewährleisten, ohne Druck auf den Bauch auszuüben.

Die Dansac TRE™ Technologie bietet drei Schutzwälle

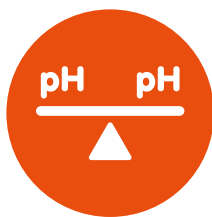

pH-Balance

Konzipiert, um den natürlichen pH-Wert aufrecht zu erhalten und sie vor Verdauungsenzymen zu schützen.



Absorption

Hilft überschüssige Feuchtigkeit aufzunehmen, um das natürliche Gleichgewicht der Haut zu erhalten – ohne dass der Hautschutz an **Formstabilität** und **Haftfähigkeit** verliert.



Adhäsion

Entwickelt für eine sichere, flexible Abdichtung, um die Haut vor Ausscheidungen zu schützen und für eine einfache Entfernung nach der Anwendung.

Informationen zu den neuen soft konvexen TRE™ Produkten



Ringgrößen	Stomagröße		Art.-Nr.	PZN	HMV
43 mm	15-25 mm		3343-15	18002732	29.26.06.0088
Plattengröße: 115 x 98 mm	25 mm		3343-25	18002749	29.26.06.0088
55 mm	15-38 mm		3355-15	18002755	29.26.06.0088
Plattengröße: 130 x 108 mm	30 mm		3355-30	18002761	29.26.06.0088
	35 mm		3355-35	18002778	29.26.06.0088
70 mm	15-52 mm		3370-15	18002784	29.26.06.1045
Plattengröße: 150 x 28 mm					

Sie haben Fragen und Bestellwünsche?

Unser kompetentes Team ist gerne für Sie da:

Mo – Do: 8.00 Uhr – 17.00 Uhr, Fr: 8.00 Uhr – 16.00 Uhr

Tel.: 0800/101 1785 (gebührenfrei)

E-Mail: kundenservice@dansac.com

Erfahren Sie, wie Sie noch mehr für die Gesundheit der peristomalen Haut bei Ihren Patientinnen und Patienten tun können: www.dansac.de

Lesen Sie vor der Verwendung die Gebrauchsanleitung mit Informationen zu Verwendungszweck, Kontraindikationen, Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Anleitungen. Dansac, das Dansac Logo, NovaLife und TRE™ sind Markenzeichen der Dansac A/S. © 2022 Dansac A/S

dansac